



ReSound GN

ReSound Remote Control 2

BRUKSANVISNING

GN Making Life Sound Better

Välkommen

Gratulerar till ditt inköp av ReSound Unite™ Fjärrkontroll 2.

Med Fjärrkontroll 2 kan du styra dina trådlösa hörapparater från ReSound. Fjärrkontrollen är både elegant och användarvänlig och fungerar även som statusavläsare som ger dig åtkomst till hörapparaternas trådlösa funktioner.

Fjärrkontroll 2 kan användas för att ställa in båda dina hörapparater samtidigt. Det går även att styra hörapparaterna individuellt, vilket gör det möjligt att finjustera hörapparaterna för specifika ljudmiljöer.

Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant för att få ut så mycket som möjligt av Fjärrkontroll 2. Kontakta din audionom om du har några frågor.

För mer information kan du besöka webbplatsen

www.resound.com

För din egen säkerhet, läs noga igenom kapitlet "Viktig information", s. 31-35.

FCC ID: X26RC-2

Information:

Utrustningen överensstämmer med avsnitt 15 i FCC-reglerna.

Följande villkor gäller för användning av apparaten: (1) Denna utrustning orsakar inte skadliga störningar och (2) denna utrustning måste acceptera mottagande störningar, inklusive störning som kan orsaka oönskad funktion.

Obs! Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital enhet, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är avsedda att ge skydd mot skadliga störningar i bostadsmiljön. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiosignaler och kan, om den inte installerats och används i enlighet med instruktionerna, orsaka störningar på radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte inträffar i en viss installation. Om denna utrustning orsakar störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts på, rekommenderas användaren att försöka åtgärda detta genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Ändringar eller modifieringar kan upphäva användarens rätt att handha utrustningen.

Avsedd användning

Fjärrkontroll 2 är avsedd att låta användaren fjärrstyra hörapparater. Den grundläggande uppgiften för Fjärrkontroll 2 är att överföra signaler till en trådlös ReSound-hörapparat för justering av volym och program.

Denna produkt är framtagen i enlighet med följande bestämmelser:

I EU: Produkten uppfyller de grundläggande kraven enligt bilaga 1 i direktiv 93/42/EEG för medicintekniska produkter (MDD).

Härmed deklarerar GN Hearing A/S att radioutrustningen av typ(er) RC-2 är i överensstämmelse med radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RE-direktivet).

Den fullständiga EU-deklarationen om överensstämmelse finns att läsa på www.declarations.resound.com

I USA: FCC CFR 47 avsnitt 15, kapitel C.

För övriga länder utanför EU och USA hänvisas till ländernas lokala regler.

IC: 6941C-RC2

Denna digitala klass B-apparat överensstämmer med den kanadensiska standarden ISED-reglerna.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ISED du Canada.

Följande villkor gäller för användning av apparaten: (1) Denna utrustning orsakar inte störningar och (2) denna utrustning måste acceptera alla störningar, inklusive störning som kan orsaka oönskad funktion hos utrustningen.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1)

l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

I JP:


I Japan har den här enheten tilldelats ett certifieringsnummer av ministeriet för inrikes affärer och kommunikation i enlighet med förordningen om certifiering av överensstämmelse med tekniska krav vad gäller specificerad radioutrustning (特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則) Artikel 2-1-19 "Denna enhet får inte modifieras (detta gör att tilldelat certifieringsnummer blir ogiltigt)."

Innehåll


Beskrivning	8
Komma igång.....	10
Justera volymen.....	12
Återställa standardinställningarna (Hem)	14
Varning vid svagt batteri.....	15
Trådlös räckvidd.....	17
Display	18
Optimal hantering av Fjärrkontroll 2.....	18
Parkoppling.....	19
Använda enheter för streamat ljud	21
Aktivera streaming från Unite™ TV/Audio Streamer.....	22
Justera volymen i streamat ljudläge	24
Telefon (tillbehör)	27
Bilaga: undantag för normal drift.....	28
Viktig information	31
Tekniska specifikationer	36
Garanti.....	37
Felsökningsguide	40
Anteckningar.....	46

Beskrivning

- 1 På/Av-knapp
- 2 Display
- 3 Streama ljud (med TV/Audio Streamer eller MiniMikrofon som tillval)
- 4 Hem
- 5 Knapp för avstängning av hörapparatens mikrofon

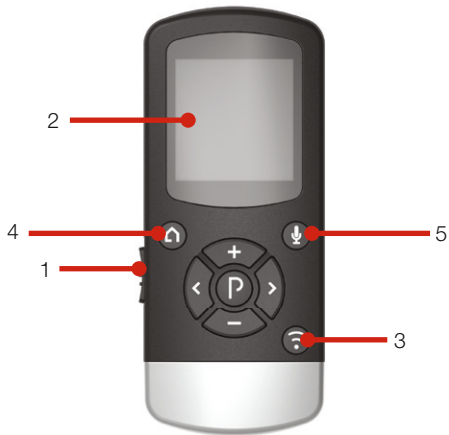

- 6 Öka volymen
- 7 Minska volymen
- 8 Välj endast vänster hörapparat
- 9 Välj endast höger hörapparat
- 10 Byt program
- 11 Parkoppling

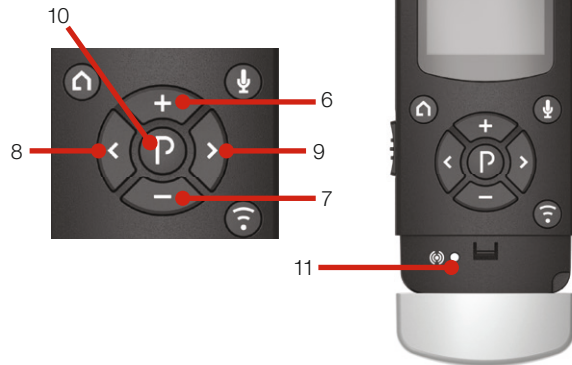

Komma igång

Ladda batteriet

Innan du använder Fjärrkontroll 2 måste du ladda det uppladdningsbara batteriet. Ladda batteriet genom att ansluta laddningskabeln enligt bilden nedan. Anslut den andra änden till ett vägguttag. Vid laddning bör laddningsindikatorn kontinuerligt växla mellan ett, två och tre streck. När batteriet är laddat visas tre streck kontinuerligt.



Slå på och av din Fjärrkontroll 2


Slå på din Fjärrkontroll 2 genom att skjuta På/Av-knappen (1 på sidan 8) ner till På-läge. Ett vitt "I" blir synligt på knappen och displayen aktiveras.

Stäng av fjärrkontrollen genom att skjuta På/Av-knappen upp till Av-läget.

"P"-knappen (10 på sidan 9) används för att växla mellan de program som din audionom har programmerat i dina hörapparater. Din audionom kan ändra programnamnen som visas. Varje gång du trycker på "P"-knappen går du vidare till nästa program i ordningsföljd. Efter det sista programmet återvänder du till det första (t.ex. 1, 2, 3, 1). Vid varje programändring hörs en ljudsignal i båda hörapparaterna, såvida din audionom inte har stängt av denna funktion vid anpassningen. Det aktuella programmet visas på displayen. För optimal prestanda rekommenderar vi att båda hörapparaterna använder samma program.



Program 1 "Standard"

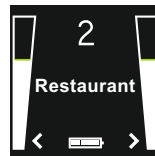

Program 2 "Restaurang"



Ladda inte fjärrkontrollen medan du bär den på kroppen.

Justera volymen

Justera volymen på båda hörapparaterna

Använd knapparna "+" och "-" för att justera volymen (6 och 7 på sidan 9). Volymen för båda hörapparater kan justeras samtidigt eller separat för varje sida. Enligt förval är båda hörapparaterna "aktiva" vilket indikeras av två pilar (< och >) intill volymindikatorerna. Du kan öka volymen på båda hörapparaterna samtidigt genom att trycka på knappen "+" eller minska volymen genom att trycka på knappen "-". Vid varje volymändring hörs en ljudsignal i båda hörapparaterna, såvida din audionom inte har stängt av denna funktion vid anpassningen. Volymnivåerna visas på displayen. Standardvolymen anges av ett grönt streck på volymindikatorerna




Justera volymen på endast den vänstra hörapparaten

Justera endast den vänstra sidan genom att först trycka på knappen "<" på knappsatsen (8 på sidan 9). När du gör detta blir den vänstra hörapparaten "aktiverad" och den högra blir "inaktiverad". Detta läge indikeras av en vänsterpil (<) på displayen. Högerpilen stängs av och den högra volymindikatorn tonas ned. Nu trycker du på "+" eller "-" för att justera volymen på endast vänster hörapparat.



Justera volymen på endast den högra hörapparaten

Justera endast den högra sidan genom att först trycka på knappen ">" på knappsatsen (9 på sidan 9). När du gör detta blir den högra hörapparaten "aktiverad" och den vänstra blir "inaktiverad". Detta läge indikeras av en högerpil (>) på displayen. Vänsterpilen stängs av och den vänstra volymindikatorn tonas ned. Tryck på "+" eller "-" för att justera volymen på endast den högra hörapparaten.

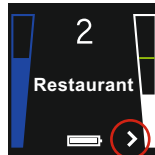



Återvänd till simultant volymjusteringsläge genom att antingen trycka på knapparna < eller > (8 eller 9 på sidan 9) på knappsatsen tills båda pilar visas på displayen vilket indikerar att båda hörapparaterna åter är "aktiva".



Obs! Om dina hörapparater använder synkronisering mellan enheterna kan de individuella volyminställningarna automatiskt justeras mellan hörapparaterna.

Avstängning/aktivering av mikrofon (ej Alera-hörapparater)

Du kan stänga av och slå på hörapparaternas mikrofoner genom att trycka på mikrofonavstängningsknappen (5 på sidan 8) på Fjärrkontroll 2. Avstängning och påslagning av mikrofonerna gäller båda hörapparaterna och kan inte väljas separat för vänster eller höger hörapparat.

När mikrofonerna är avstängda ändras mikrofonsymbolen  till en överkryssad mikrofon  och volymindikatorerna tonas ned. Aktivera mikrofonerna genom att trycka på mikrofonavstängningssknappen igen.

Aktivera streaming

Om du har ett ReSound streaming-tillbehör såsom TV/Audio Streamer eller MiniMikrofon, kan du aktivera ljudöverföring från dessa enheter genom att trycka på streaming-knappen (3 på sidan 8). Se även avsnittet Använda enheter för streamat ljud.

Återställa standardinställningarna (Hem)

Standardinställningarna, dvs. de inställningar som används när hörapparaterna slås på, aktiveras genom att trycka på Hem-knappen (4 på sidan 8). Vid tryck på Hem-knappen:


- Program 1 aktiveras i båda hörapparaterna
- Ändra volymen i båda hörapparaterna till standardvolymen
- Aktivera simultan volymjustering

Hem-knappen avbryter även streamat ljud från anslutna ReSound streaming-enheter.

Varning vid svagt batteri

Varning vid svagt batteri i Fjärrkontroll 2

Batterispänningen i Fjärrkontroll 2 visas med en indikator med tre streck. I takt med att batteriet förbrukas försvinner ett streck i taget. När batteriet nästan är urladdat börjar indikatorn blinka vilket innebär att batteriet bör laddas.

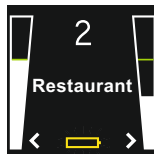

Svagt batteri i Fjärrkontroll 2

Varning vid svagt batteri i hörapparaten

När hörapparaternas batterier börjar ta slut indikeras detta intill volymindikatorerna på fjärrkontrollens display. Pilarna som anger vänster (<) eller höger (>) hörapparat kommer att växla mellan visning av pil/pilar och en vertikal batterisymbol som anger vilken hörapparat som har svagt batteri.



Svagt batteri i vänster hörapparat




Svagt batteri i höger hörapparat


Återstående batteritid är beroende av hörapparatstyp och driftläge och därför rekommenderar vi batteribyte vid batterivarning för att garantera full funktionalitet.

Trådlös räckvidd


Den trådlösa räckvidden mellan Fjärrkontroll 2 och hörapparaterna är cirka 100 cm. Om du inte kan se statusen på Fjärrkontroll 2, ska du hålla fjärrkontrollen framför bröstet enligt bilden.



Om Fjärrkontroll 2 inte kan visa statusen på hörapparaterna visas söksymboler  på displayen. Håll Fjärrkontroll 2 som visat för att upprätta en anslutning till båda hörapparaterna.

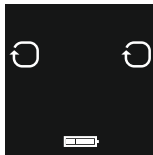

Sökning efter båda hörapparaterna

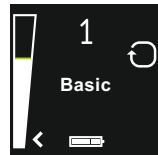

Ansluten till vänster hörapparat, sökning efter höger hörapparat pågår

Display

För att minska batteriförbrukningen har Fjärrkontroll 2 ett viloläge som aktiveras efter 20 sekunder när fjärrkontrollen inte används. Om displayen är släckt trycker du helt enkelt på valfri knapp för att aktivera displayen och använda önskad funktion.

Optimal hantering av Fjärrkontroll 2

Fjärrkontroll 2 fungerar bäst när du trycker på en knapp i taget i stället för i snabb följd. När du t.ex. justerar volymen bör du invänta tonsignalen* innan du fortsätter. Detta tips gäller för alla knappar och i synnerhet volymjustering.


**Observera att din audionom kan ha stängt av ljudsignalerna*

Parkoppling

Obs! Följande information är främst avsedd för din audionom, som i de flesta fall kommer att slutföra de uppgifter som är nödvändiga innan Fjärrkontroll 2 kan användas med dina hörapparater. Processen är dock utformad att vara enkel och kan utföras av de allra flesta.

Vid parkoppling upprättas exklusiv kommunikation mellan dina hörapparater och Fjärrkontroll 2. Din audionom kan utföra parkopplingen under anpassningen av hörapparaterna. Alternativt kan du följa instruktionerna nedan för att parkoppla dina hörapparater med Fjärrkontroll 2:

1. Kontrollera att Fjärrkontroll 2 är laddad och påslagen. Hörapparaterna måste vara avstängda – öppna batteriluckorna.
2. Tryck en gång på parkopplingsknappen på Fjärrkontroll 2 (11 på sidan 9). Detta aktiverar parkopplingsläget som förblir aktivt i 20 sekunder.
3. Medan parkopplingsläget är aktiverat stänger du hörapparaternas batteriluckor och kontrollerar att de är

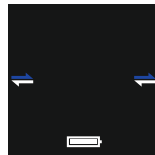

Sökning efter båda
hörapparaterna

påslagna. Vid lyckad parkoppling hörs en signal i båda hörapparaterna varefter volymindikatorer och program "1" visas på fjärrkontrollens display (se nedan). Du kan nu börja använda Fjärrkontroll 2!



Hörapparater i program 1

Använda tillbehör för streamat ljud

ReSound TV/Audio Streamer™ och MiniMikrofon™ är tillbehör för streamning av ljud och tal som du kan ansluta till dina hörapparater.

TV/Audio Streamer sänder ljud från din TV, stereo, dator och annan utrustning direkt till dina hörapparater.

MiniMikrofonen överför ljud och tal trådlöst direkt till dina hörapparater.

Aktivera ljudstreamingen från TV/Audio Streamer eller MiniMikrofonen genom att trycka på streaming-knappen (3 på sidan 8) på Fjärrkontroll 2. Hörapparaterna söker då efter enheten som sänder ljudet.



Aktivering av streaming från ReSound Unite™ TV/Audio Streamer

Starta streaming från din TV, stereo eller en annan ljudkälla ansluten till din TV/Audio Streamer genom att helt enkelt slå på ljudenheten och sedan trycka på streaming-knappen (3 på sidan 8). Hörapparaterna börjar omedelbart söka efter TV/Audio Streamer och ansluta till den.



Sökning efter TV



Ansluten till TV



Hittar inte TVn

Du kan ha upp till 3 enheter anslutna för ljudstreaming. Varje streaming-enhet har en bokstavsbezeichnung på displayen: A, B eller C. Om mer än en streaming-enhet är ansluten trycker du på streaming-knappen igen tills önskad ljudkälla hörs.

Justera volymen i streamat ljudläge

(Begränsad funktionalitet för trådlösa ReSound Alera hörapparater. Se avsnittet "Justera volymen på ReSound Alera i streamat ljudläge").

I streamat ljudläge är volymjustering för båda hörapparaterna (vänster volymindikator) och streamat ljud (höger volymindikator) aktiverat som standard. Detta indikeras av två pilar (< och >) intill volymindikatorerna på displayen. Justera både hörapparat och streamat ljud samtidigt genom att trycka på knappen "+" eller "-" (6 eller 7 på sidan 9) på fjärrkontrollen.

Obs! Om du har två hörapparater kommer volymjusteringen att gälla för båda apparaterna.

Det är även möjligt att justera hörapparaternas volym och den streamade ljudsignalen individuellt.


Justera endast hörapparatens volym



Justera hörapparatens volym genom att trycka en gång på knappen "<" på knappsatsen (8 på sidan 9). Nu visas två pilar "<>" intill hörapparatens volymindikator och volymindikatorn för "streamat ljud" bör vara nedtonad.

Tryck på "+" eller "-" (6 eller 7 på sidan 9) för att justera hörapparatens volym.

Återvänd till simultant volymjusteringsläge genom att trycka på knappen ">" (9 på sidan 9) på knappsatsen tills en pil visas intill varje volymindikator på displayen, vilket indikerar att båda volymnivåerna är "aktiva".

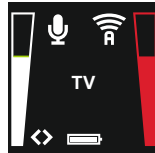

Justera endast volymen på streamat ljud



Justera volym på streamat ljud genom att trycka en gång på knappen ">" på knappsatsen (9 på sidan 9). Nu visas två pilar "<>" intill volymindikatorn för streamat ljud och volymindikatorn för "hörapparat" bör vara nedtonad.

Tryck på "+" eller "-" (6 eller 7 på sidan 9) för att justera volymen på streamat ljud.

Återvänd till simultant volymjusteringsläge genom att trycka på knappen "<" (8 på sidan 9) på knappsatsen tills en pil visas intill varje volymindikator på displayen, vilket indikerar att båda volymnivåerna är "aktiva".



Justera volymen på ReSound Alera i streamat ljudläge

Om du använder ReSound Alera trådlösa hörapparater kommer volymjusteringen endast att påverka den streamade ljudsignalen.

Justera volymen med knapparna "+" och "-" (6 eller 7 på sidan 9). Volymen på den streamade ljudsignalen kan även justeras individuellt för vänster och höger hörapparat genom att trycka på < eller > (8 eller 9 på sidan 9).

Avbryt streaming och återvänd till föregående program genom att trycka på knappen "P" (10 på sidan 9). Alternativt kan du trycka på Hem-knappen (4 på sidan 8), vilket återställer hörapparaterna till standardinställningarna (se avsnittet "Återställa standardinställningarna (Hem)") och återställ även Fjärrkontroll 2 till simultant justeringsläge.

Telefon (tillval)

ReSound Unite™ TelefonClip+ och AutoTelefon™ fungerar med Fjärrkontroll 2. När du använder TelefonClip+ eller AutoTelefon indikeras detta på displayen:

När telefonsamtalet har avslutats återvänder hörapparaterna till det tidigare programmet. Det aktuella programmet visas på fjärrkontrollens display. Volymjusteringar som har gjorts under

telefonsamtalet kommer inte att överföras till det tidigare programmet.

Telefonsamtal kommer att tillfälligt avbryta streamat ljud från anslutna enheter, men återupptas när samtalet har avslutats.



Bilaga: undantag för normal drift

Vi rekommenderar att båda hörapparaterna alltid använder samma program. Det är dock möjligt att använda olika program i hörapparaterna, t.ex. program 1 på vänster sida och streamat ljud på höger. Under dessa förhållanden fungerar Fjärrkontroll lite annorlunda vilket följande exempel visar.

Situation nr 1: Du hade ursprungligen program 1 på båda sidorna men bytte till program 2 på höger med hjälp av tryckknappen på den högra hörapparaten. Om du nu trycker "P"-knappen på fjärrkontrollen går den vänstra hörapparaten vidare till program 2, dvs. samma program som den högra hörapparaten använder. Ytterligare tryckningar på "P"-knappen går vidare till nästa program på båda hörapparaterna vilket innebär att samma program används på höger och vänster sida.

Situation nr 2: Du har valt program 1 på vänster och program 2 på höger. Om du nu trycker på streaming-knappen kommer båda hörapparaterna att ta emot streamat ljud från samma källa (t.ex. TV). Om du nu trycker på "P"-knappen kommer streamat ljud att avbrytas på båda sidorna och hörapparaterna återgår till sina ursprungliga program (program 1 och program 2).

Situation nr 3: Du har program 1 på vänster sida men har aktiverat streamat ljud på höger sida genom en lång knapptryckning på den högra hörapparaten. Om du nu trycker "P"-knappen kommer

den högra apparaten att återgå till det ursprungliga programmet och den vänstra går vidare till nästa program. Ytterligare ett tryck på "P"-knappen ställer in hörapparaterna på samma program.

Om du i stället trycker på streaming-knappen kommer båda hörapparaterna ställas in på samma streamande ljudprogram.

Situation nr 4: Båda hörapparaterna har program 1 men använder AutoTelefon på vänster sida. Om du trycker på "P"-knappen under telefonsamtal kommer den högra hörapparaten att gå vidare till program 2 utan att störa telefonsamtalet. Efter samtalet kommer den vänstra hörapparaten att använda program 1. Om du trycker på streaming-knappen under telefonsamtalet, kommer streamat ljud endast att aktiveras på höger sida vilket innebär att samtalet kan fortsätta på den vänstra hörapparaten.

Situation nr 5: Streaming-knappen har använts för att aktivera streamat ljud på båda sidorna men du använder AutoTelefonfunktionen på den vänstra sidan. Om du trycker på "P"-knappen under samtal kommer streamat ljud på den högra hörapparaten att avbrytas utan att störa telefonsamtalet. Om du trycker på streaming-knappen under samtalet, kommer den högra sidan att gå vidare till nästa streaming-program i ordningsföljd vilket innebär att samtalet kan fortsätta på den vänstra hörapparaten.

Situation nr 6: Om hörapparaterna använder olika hörprogram visas enbart programnumret för respektive hörapparat. Ingen pro-

grambeteckning eller namn visas.

Situation nr 7: Om en hörapparat är i streamingläge och den andra i ett hörprogram kommer displayen endast att visa streamingläge och ingen information om vilket hörprogram som är aktivt.

Viktig information



Skötsel och underhåll

- Rengör Fjärrkontroll 2 med en fuktig trasa. Använd aldrig rengöringsmedel (tvättpulver, tvål osv.) eller alkohol för att rengöra enheten.
- Skydda Fjärrkontroll 2 mot fukt (bad, simning) och värme (element, bilens instrumentbräda). Skydda den mot kraftiga stötar och vibrationer.



Allmänna varningar

- Håll Fjärrkontroll 2 utom räckhåll för barn under 3 år.
- Fjärrkontroll 2 kommunicerar trådlöst med andra apparater via en kodad digital signal med låg effekt. Även om det är osannolikt kan elektroniska enheter i närheten störas. Flytta i så fall bort Fjärrkontroll 2 från enheten som påverkas.
- Flytta bort från källan om Fjärrkontroll 2 påverkas av elektromagnetiska störningar när du använder enheten.



- Dina hörapparater och Fjärrkontroll 2 har fått en unik kommunikationskod vid anpassningen. Detta säkerställer att Fjärrkontroll 2 inte kommer att påverka hörapparater som bärs av andra.
- Kraftfull elektronisk utrustning, större elektroniska installationer och stålkonstruktioner kan hämma och avsevärt reducera räckvidden.
- Använd endast originaltillbehör från ReSound.
- Gör inga ändringar eller modifieringar av Fjärrkontroll 2.
- Fjärrkontroll 2 kan skadas om den öppnas. Om du inte kan åtgärda eventuella problem med hjälp av felsökningsguiden i denna handbok bör du kontakta din audionom.
- Fjärrkontroll 2 får endast repareras av ett auktoriserat servicecenter.
- Använd inte Fjärrkontroll 2 i områden där radiovågor inte får utsändas, t.ex. i flygplan osv.
- Anslut endast Fjärrkontroll 2 till anslutningar som den är avsedd för.



Observera följande då produkten innehåller ett batteri

- Din produkt drivs av ett laddningsbart batteri.
- Ett nytt batteri fungerar bäst först efter två eller tre fullständiga laddningar och urladdningar.
- Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men småningom har det tjänat ut.
- Koppla bort laddaren från eluttaget och produkten när den inte används.
- Om det lämnas oanvänt kommer ett fulladdat batteri som inte används så småningom laddas ur.
- Om du lämnar produkten på varma ställen, t.ex. i en stängd bil på sommaren, minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas.
- En produkt med ett kallt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är fulladdat. Batteriets prestanda är begränsat i temperaturer långt under fryspunkten.

Batterivarning



- "Varning" - Det batteri som används i denna produkt kan medföra risk för brand eller kemiska brännskador om det hanteras felaktigt.
- Försök inte öppna produkten eller byta ut batteriet.
- Det är inbyggt och kan inte bytas. Användning av andra batterier kan medföra risk för brand eller explosion och garantin upphör att gälla.
- Batteriet produkten kan inte tas bort eller ersättas av användaren. Varje försök att göra detta är riskfyllt och kan resultera i skador av produkten.
- Ladda endast Fjärrkontroll 2 med laddaren som medföljer produkten.
- Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Vänligen återvinn om möjligt.
- Släng inte batteriet med hushållsavfallet eller i öppen eld eftersom det kan explodera.
- Batterier kan explodera.

Hantering av laddare



Observera följande om produkten levereras med en laddare

- Försök inte att ladda produkten med något annat än den medföljande nätadaptorn. Användning av andra tillbehör kan skada eller förstöra produkten och kan vara farlig.
- Användning av andra laddare kan att garantin upphör.
- kontrollera med din audionom vilka tillbehör som är godkända.
- Ladda produkt enligt de instruktioner som medföljer produkten.

Laddningsvarning!



- När du kopplar ur nätsladden eller något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.
- Använd aldrig en laddare som är skadad.
- Försök inte montera isär laddaren eftersom det kan utsätta dig för farliga elektriska stötar.
- Felaktig montering kan orsaka elstötar eller brand när produkten sedan används.
- Undvik att ladda din produkt i extremt höga eller låga temperaturer och använd inte laddaren utomhus eller i fuktiga utrymmen.

Tekniska specifikationer

Räckvidd:	upp till 3 meter
Trådlöst:	2,4 GHz
Drifttemperatur:	0 till 45 °C
Förvaringstemperatur:	-20 till 45 °C

Temperaturtest, transport och förvaringsinformation

Produkten har genomgått olika temperaturtester och fukttester mellan -25° C och +70 °C enligt intern och industriell standard.

Garanti

ReSound Unite™ Fjärrkontroll 2 täcks av en begränsad garanti som utfärdats av tillverkaren för en period av 12 månader från den ursprungliga inköpsdagen. Observera att garantin kan vara utökad i ditt land. Kontakta din audionom för mer information.

Vad täcks av garanti?

Elektriska komponenter som på grund av tillverknings- eller konstruktionsfel slutar fungera vid normal användning under garantitiden, byts ut eller repareras utan kostnad om produkten återlämnas till inköpsstället.

Om det beslutas att reparation inte är möjlig, kan hela enheten ersättas med en motsvarande enhet i samförstånd mellan audionom och användare.

Vad täcks inte av garanti?

Fel som beror på felaktig hantering och användning, olyckor eller fel som uppstått vid service genom en icke-auktoriserad reparatör samt om MiniMikrofonen utsatts för miljöer med mycket fukt. Kontakta din audionom för mer information. Ovanstående garanti påverkar inte några lagliga rättigheter som du kan ha enligt nationell lagstiftning som reglerar försäljning av konsumentprodukter. Din audionom kan ha utfärdat en garanti som sträcker sig utöver denna begränsade garanti. Kontakta din audionom för ytterligare information.

Serienummer _____

Datum för inköp: _____

Felsökningsguide

SYMPTOM	ORSAK	MÖJLIGA ÅTGÄRDER
<i>Displayen förblir avstängd när du trycker på någon knapp på Fjärrkontroll 2</i>	Fjärrkontroll 2 är avstängd	Slå på Fjärrkontroll 2 genom att skjuta På/Av-knappen till läget PÅ
	Fjärrkontrollens batteri är urladdat	Ladda batteriet
<i>Ingen information visas på displayen när den har aktiverats</i>	Fjärrkontroll 2 och hörapparaterna har inte parkopplats	Utför parkoppling
<i>Du har tryckt på fjärrkontrollens parkopplingsknapp men "sök"-symbolen på displayen ersätts inte av hörapparatens status</i>	Fjärrkontrollen och hörapparaten är inte inom trådlös räckvidd	Kontrollera att Fjärrkontroll 2 och hörapparaten är inom trådlös räckvidd och upprepa parkopplingsprocessen
	Fjärrkontroll 2 och hörapparaterna har inte varit i parkopplingsläge samtidigt	Upprepa parkopplingsprocessen och se till att batteriluckorna på hörapparaterna stängs inom 20 sekunder från det att parkopplingsknappen har tryckts in på Fjärrkontroll 2

Felsökningsguide

SYMPTOM	ORSAK	MÖJLIGA ÅTGÄRDER
<i>"Sök"-symbolen på fjärrkontrollens display visas kontinuerligt</i>	Fjärrkontroll 2 och hörapparaten är inte inom trådlös räckvidd	Kontrollera att Fjärrkontroll 2 och hörapparaten är inom trådlös räckvidd
	Hörapparaten är inte påslagen	Slå på hörapparaten
	Hörapparatens batteri är urladdat	Byt batteri i hörapparaten
<i>Två olika programnummer eller symboler visas på displayen</i>	De två hörapparaterna använder inte samma program. Detta kan bero på flera orsaker, t.ex. att den ena hörapparaten inte var inom trådlös räckvidd när kommandot sändes från Fjärrkontroll 2, eller det kan bero på att du har ändrat program på en av hörapparaterna genom att trycka på knappen på hörapparaten	<i>Obs!</i> På grund av inbyggda prioriteringsregler påverkar detta kommando hörapparaten när telefonprogrammet används (dvs. när en telefonsymbol visas på fjärrkontrollens display)

Felsökningsguide

SYMPTOM	ORSAK	MÖJLIGA ÅTGÄRDER
<i>Vid volymjustering med knapparna "+" eller "-" ändras inte volymen på en av hörapparaterna.</i>	Volymkontroll aktiveras endast för en av hörapparaterna (dvs. endast en av pilarna "<" och ">" visas på fjärrkontrollens display)	Tryck på "<" eller ">" för att aktivera volymkontroll för den andra hörapparaten

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar

Var uppmärksam på information märkt enligt nedan:



WARNING visar på information som kan leda till allvarliga skador,

WARNING visar på situationer som kan leda till mindre eller måttliga skador



Råd och tips om hur du hanterar ditt ReSound Unite-tillbehör bättre.




Utrustningen innehåller radiosändare.

Nominell RF-uteffekt vid sändning är 3,4 dBm.



Produkten är klassad som "Type B applied part".

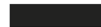

Fråga din audionom om var du ska lämna in ett ReSound-tillbehör som inte längre används

© 2018 GN Hearing A/S. Med ensamrätt. ReSound är ett varumärke som tillhör GN Hearing A/S.

Tillverkare enligt EU:s medicintekniska direktiv 93/42/EEG:

Huvudkontor

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danmark
T: +45 4575 1111
resound.com

Sverige

GN Hearing Sverige AB
Box 21075
SE-200 21 Malmö
T: +46 31 800 150
info-se@gnhearing.com
gnhearing.se

CVR no. 55082715

Finland

GN Hearing Finland Oy/Ab
Pihatörmä 1 A 21
FI-02211 Espoo
Puh.: +358 9 4777 9700
kuulo@gnresound.com
resound.com



Alla frågor som rör EU Medicintekniska direktivet 93/42/EEG eller EU direktivet för Radioutrustning 2014/53/EU skall hänvisas till GN Hearing A/S.

